




DCIC – PROFESIONÁLNÍ tryska s vodním paprskem & ÚSTNÍ SPRCHA

Návod k použití - CZ

UPOZORNĚNÍ

- **Důkladně si přečtěte všechny pokyny a uchovejte je pro budoucí použití.**
- Tento spotřebič nesmí používat děti do 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jim nebylo pod dohledem vysvětleno používání spotřebiče bezpečným způsobem a oni porozuměli nebezpečí z toho plynoucí. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Tento spotřebič musí být dodáván pouze v bezpečnostním mimořádně nízkém napětí odpovídajícím značení na spotřebiči. Pokud je nějaká část síťového adaptéru nebo kabelu poškozena, přestaňte jej používat. Kontaktujte oddělení péče o zákazníky, abyste si zajistili výměnu.
- Výrobek neponořujte do vody. **NEPOUŽÍVEJTE** rozpouštědla ani abrazivní čističe.
- **NEPOUŽÍVEJTE** tento výrobek, pokud nefunguje správně, nebo je poškozen.
- Při plnění vodou a čištění vodní nádrže zajistěte, aby byla jednotka vypnutá a odpojena od zdroje energie.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích mazlíčků.
- Výrobek neukládejte tam, kde by mohl spadnout do vany nebo do umyvadla.
- V zařízení nejsou žádné součásti opravitelné uživatelem.
- Uchovávejte mimo zařízení, která jsou citlivá na vodu, abyste zabránili nehodám.
- Aby nedošlo k šíření bakterií, zajistěte, aby byl přístroj a hubice důkladně omyty mýdlovou vodou a před uložením nechte všechny části přístroje vyschnout.
- Nenaplňujte zásobník vodou o teplotě vyšší než 40 ° C.
- Naplňte vodní nádrž pouze vodou pitnou nebo ústní vodou. Některé antibakteriální roztoky (tj. předepsané roztoky) mohou zkrátit životnost výrobku.
- Nepoužívejte k jinému účelu než k čištění úst.
- Pokud jste v posledních 2 měsících absolvovali orální nebo zubní chirurgii, poraďte se se svým zubním lékařem před použitím tohoto přístroje.
- Netlačte trysku příliš silně proti zubům nebo dásním. Mohlo by dojít k poranění.
- Doporučujeme výměnu trysek každých 6 měsíců.
- Nepoužívejte, jestliže máte otevřené rány na jazyku nebo v ústech.
- Nepoužívejte při nošení orálních šperků. Před použitím všechny orální šperky odstraňte.

POZNEJTE SVŮJ PŘÍSTROJ

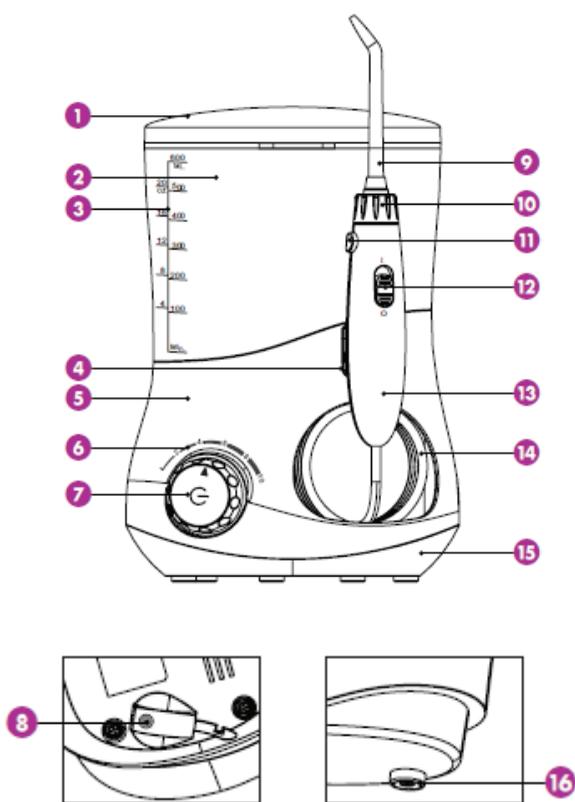

1. Pouzdro na trysku
2. Nádrž na vodu
3. Označení obsahu
4. Držák rukojeti
5. Základna jednotky
6. Tlaková / pulzní rychlost
7. Hlavní tlačítko:
 - Stiskněte - Ovládání zapnutí / vypnutí
 - Otočte - Rychlost tlaku / impulsu
8. Konektor DC konektoru
9. Tryska
10. Konektor trysky
11. Uvolňovací tlačítko
12. Přepínač pauzy
13. Rukojeť
14. Hadička
15. Spodek jednotky
16. Vypouštěcí ventil



1x standardní tryska



1x čistič jazyka



1x ortodontická tryska



1x kapesní tryska

ZAČÍNÁME

Umístěte přístroj na rovný povrch bez ostrých předmětů a ujistěte se, že je kabel suchý a nepoškozený. Přístroj je napájen speciálním adaptérem s konektorem DC.



KROK 1

Zasuňte zástrčku do zdířky DC na spodní straně základny a zasuňte adaptér do elektrické zásuvky.



KROK 2

Vyměňte pouzdro trysky.



KROK 3


Vyměňte vodní nádrž a naplňte vodou, která není teplejší než 40 ° C.



KROK 4

Vyměňte zásobník na horní straně hlavní jednotky a pevně ji zatlačte. Vyměňte pouzdro trysky.

VLOŽENÍ A ODSTRANĚNÍ TRYSEK

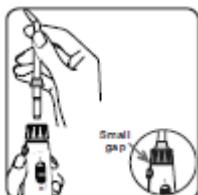

Vložení trysky


Vložte špičku do středu spojky trysek, dokud neucítíte, že klepnete na doraz. Jemně zkuste vytáhnout špičku, aby bylo jisté, že je pevně zajištěna.



Demontáž trysky

Stiskněte uvolňovací tlačítko na rukojeti a vytáhněte trysku ven.

POUŽITÍ

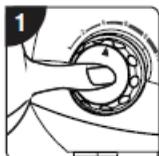

KROK 1

Při prvním použití jednoduše nasměrujte trysku na umyvadlo a poté stisknutím hlavního tlačítka zapněte přístroj.




KROK 2

Otočte hlavní tlačítko na přístroji a nastavte tlak vody / pulsni frekvenci. Posunutím přepínače na rukojeti do polohy "O" přerušíte tok vody.




KROK 3

Nyní stojíte nad umyvadlem a umístíte špičku do úst a posunete přepínač Pause do polohy „I“. Udržujte ústa mírně otevřená, aby nedošlo ke stříkání vody.

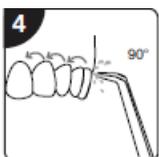

KROK 4

Umístíte tok proudů vody v úhlu 90 ° na zuby a dásně.

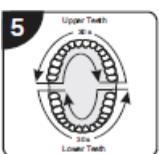

KROK 5

Přesuňte vodní paprsek pomalu podél zubů. Průtok vody se krátce zastaví v 30 sekundových intervalech, aby vám připomněl přesun na další řadu dásní, tj. venku, uvnitř, nahoře a dole. Zařízení bude pokračovat v provozu, dokud nebude dokončen dvouminutový cyklus.

ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ

Posunutím přepínače Pause na rukojeti do polohy "O" přerušíte tok vody a poté stiskněte tlačítko ON / OFF.

PO POUŽITÍ

KROK 1

Vypusťte nádrž na vodu a likvidujte veškerou nepoužívanou vodu.

KROK 2


Přemístěte přepínač Pozastavit do polohy "I", nasměrujte trysku směrem k umyvadlu a zapněte ji, abyste vypustili vodu zevnitř přístroje a potom posuňte přepínač Pause do polohy "O". Vypněte přístroj a odpojte adaptér.



KROK 3

Stiskněte uvolňovací tlačítko a odstraňte trysku a umístíte ji do pouzdra trysky.

- K čištění trysky vyjměte z hlavy rukojeti stisknutím tlačítka uvolnění trysky. Opláchněte ji a důkladně osušte.
- Ujistěte se, že je skříň trysky a tryska pevně nainstalována před tím, než přístroj znovu zapnete.

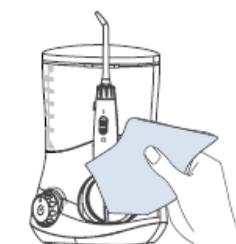

KROK 4


Pro čištění jednotky používejte vlhkou čistou látku.

FUNKCE



Čištění jazyka:

Chcete-li svůj jazyk vyčistit, jemně umístěte čistič jazyka na středovou čáru jazyka přibližně do poloviny. Nejdříve použijte nastavení tlaku vody / pulsů a podle potřeby postupně zvyšujte.

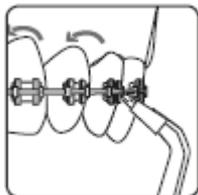

Ortodontická špička:

Ortodontická špička je speciálně navržena pro osoby, které nosí rovnátka. Je ideální pro čištění obtížně přístupných míst kolem držáků. Pomalu posuňte špičku podél dásně, krátce se zastavte, abyste použili kartáčové štětiny pro vyčištění oblasti mezi zuby a kolem ortodontických rovnátek.



Kapesní hrot:

Kapesní špička je speciálně navržena pro čištění periodontálních kapes. Používejte pouze na nejnižším nastavení tlaku / pulsů.

Umístěte měkkou špičku na zub pod úhlem 45 ° a jemně zatlačte hrot pod linii dásní, aby se dostala do kapsy.



ÚDRŽBA

- Pro čištění přístroje používejte pouze vodu nebo neutrální čisticí prostředek.
- Nikdy nepoužívejte žíravé nebo abrazivní prostředky (např. odstraňovače na bázi octa nebo vápna), protože by mohly poškodit spotřebič.
- Nepoužívejte vodu teplejší nad teplotu 40 ° C.
- Udržujte přístroj mimo vysokou teplotu a vyhněte se přímému slunečnímu záření.

Hlavní jednotka

1. Vyjměte nádrž na vodu a vypusťte zbývající vodu zevnitř přístroje.
2. Vyčistěte vlhkou utěrkou s tekutým mýdlem a vysušte suchým hadříkem.
3. Nečistěte hlavní jednotku vodou.

Rukojeť

1. Umyjte vodou a vysušte ji měkkým hadříkem.
2. Vodní hadici neohýbejte, ani neotáčejte.

Nádrž na vodu

1. Umyjte vodou a utřete měkkým suchým hadříkem.
2. Ujistěte se, že nádrž na vodu je pevně připevněna před uložením.

Tryska

1. Umyjte vodou a utřete měkkým suchým hadříkem.
2. Umístěte trysku do odkládacího prostoru.
3. Vyměňte standardní čisticí trysku a čistič jazyka každých šest měsíců a další nástavce jednou za tři měsíce.

Nabíjecí adaptér

Každých šest měsíců utřete kovovou část napájecí zástrčky suchým hadříkem.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možná příčina	Řešení
Jednotka nefunguje.	Motor není spuštěn.	Ujistěte se, že adaptér je pevně připojen k zásuvce a je zapojen.
		Ujistěte se, že je zásuvka a napájení jednotky zapnuté.
Tlak vody je velmi nízký.	Nečistoty zaseknuté v trysce.	Očistěte nebo vyměňte za novou trysku.
	Tryska je deformována.	Nahradte novou tryskou.
	Zanesená nečistota ve ventilu nádržky.	Vyčistěte ventil a naplňte nádrž čistou vodou.
Voda nevychází.	Nádrž je prázdná.	Naplňte nádrž.
	Je zapnutý spínač pauzy.	Zajistěte, aby byl spínač v poloze "I".
	Ventil zásobníku není otevřený.	Zatlačte na nádrž dolů a ujistěte se, že je správně namontována.
Únik vody z nádrže.	Vadný ventil.	Nahradte novým ventilem.
	Ventil není správně nainstalován.	Vyměňte ventil a znova namontujte.
Prasklý hrot trysky.	Špička hrotu trysky je opotřebovaná.	Vyměňte za novou trysku.

LIKVIDACE

Směrnice o Likvidaci starých elektrických a elektronických přístrojů (WEEE) směrnice (2002/96/EC) platí pro recyklaci produktů použitím nejlepších technik k minimalizaci dopadu na životní prostředí, odstraněním nebezpečných látek a zabráněním zvyšování odpadu.



Výrobek je klasifikován jako Elektrické nebo elektronické zařízení, proto zajistěte na konci jeho životnosti správnou likvidaci správným způsobem v souladu s místními předpisy. Nesmí se likvidovat společně s běžným domovním odpadem.

SPECIFIKACE

Vstupní jednotka: DC 12V 1,5A, 18W
Tlak vody: 30-110psi

-  Před použitím si pozorně přečtěte tyto pokyny a uchovejte je pro budoucí použití.
-  Tento výrobek je určen pouze pro vnitřní použití.
-  Tento produkt je v souladu s platnými právními předpisy EU.
-  Zásuvka: Vložte středový kolík

KONTAKT NA SERVISNÍ STŘEDISKO:

Výhradní dovozce a distributor pro ČR a SK:

BORGY CZ, a.s.

Reklamace / servis

areál RTK, Zápy 4, 250 01

Česká republika

Tel.: +420 326 320 662

E-mail: reklamace@borgy.cz

www.borgy.cz

www.riobeauty.com

© The Dezac Group Ltd 2019
Manufactured by The Dezac Group Ltd PO Box 17, Cheltenham, England GL53 7ET

1-IN-DCIC-CZ/1.0