




CS	Sauna maska	
	Návod k použití.....	3
SK	Tvárová sauna	
	Návod na obsluhu	12



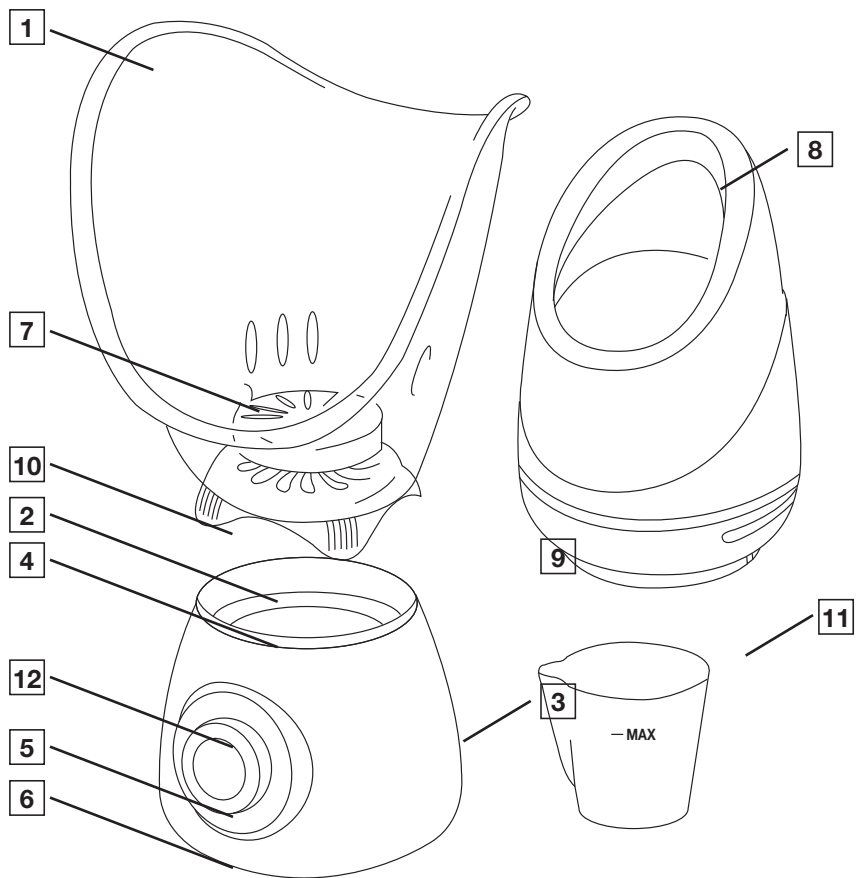

Tento návod k použití si pečlivě prostudujte. Dodržujte výstražné a bezpečnostní pokyny. Návod k použití uschovejte pro pozdější použití. Zajistěte, aby návod k použití byl přístupný jiným uživatelům. Při předání přístroje předejte také návod k použití.

Obsah balení

Zkontrolujte, zda je obsah balení uložen v neporušeném obalu a zda je kompletní. Před použitím se ujistěte, zda přístroj a jeho příslušenství nevykazují žádná viditelná poškození a zda jsou odstraněny veškeré obaly. V případě pochybností přístroj nepoužívejte a obraťte se na prodejce nebo zákaznický servis. Adresy servisních středisek jsou uvedeny v návodu.

1 x Sauna maska

2 x Nástavce

1 x Odměrka

1 x Návod k použití

1x Záruční list

Obsah








1. Vysvětlení symbolů.....	4	6.1 Použití sauny na obličej.....	7
2. Varovné a bezpečnostní pokyny.....	5	6.2 Použití léčivých bylin, olejů a jiných aromatických látek.....	8
3. Použití v souladu s určením.....	5	6.3 Použití parní masky na nos/ústa. ..	8
3.1 Důležitá upozornění během použití5		7. Čištění a údržba	8
3.2 Důležitá upozornění pro použití.....	6	8. Likvidace	8
4. Popis přístroje.....	6	9. Technické údaje.....	9
5. Uvedení do provozu	6	10. Záruka	9
6. Použití	7		






VAROVÁNÍ

- Příklad je určen pouze pro použití v domácím/soukromém prostředí, ne v komerční oblasti.
- Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let, i osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly poučeny ohledně bezpečného používání přístroje a pokud chápou z toho vyplývající rizika.
- Děti si s přístrojem nesmějí hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dohledu.
- Jestliže dojde k poškození napájecího kabelu u tohoto přístroje, musíte ho odstranit. Pokud ho nelze vyjmout, musíte zlikvidovat přístroj.
- Vždy dbejte na to, aby přístroj stál bezpečně na rovném podkladu. Hrozí nebezpečí opaření vytékající kapalinou.
- Pozor! Vystupující pára je horká!
- V žádném případě nesmíte přístroj otvírat ani opravovat, jinak již nelze zaručit jeho správné fungování. V případě nedodržení těchto pokynů záruka zaniká.

1. VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ

Na přístroji, v návodu k použití, na obalu a typovém štítku přístroje jsou použity tyto symboly:

	Varování	Varovné upozornění na nebezpečí poranění nebo riziko ohrožení zdraví
	Pozor	Bezpečnostní upozornění na možné poškození přístroje/příslušenství
	Pozor	Aplikace využívejte pouze u stupně 1! Použití ve stupni 2 může v důsledku horké páry a zahřátí nástavce způsobit zarudnutí kůže nebo popáleniny.
	Značka CE	Tento výrobek splňuje požadavky platných evropských a národních směrnic.
		Likvidace podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)
		Výrobce
	Přístroj třídy ochrany II	Přístroj má dvojnásobnou ochrannou izolaci a odpovídá tak ochranné třídě 2

	<p>Obličej nemějte příliš blízko masky, aby Vás neopařila horká pára.</p>
	<p>Čtěte pokyny</p>
	<p>Výrobky prokazatelně odpovídají technickým předpisům EEU.</p>
	<p>Obal zlikvidujte s ohledem na životní prostředí.</p>
	<p>Označení posouzení shody pro Spojené království</p>

2. VAROVNÉ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Varování

- Přístroj je určen pouze k účelům uvedeným v tomto návodu k použití. Výrobce není zodpovědný za škody vzniklé nepřiměřeným a lehkomyšlným použitím. Přístroj není vhodný k obchodním účelům a k použití v lékařském oboru. Používejte přístroj pouze pro soukromé domácí účely.
- Nepoužívejte přístroj v těchto případech: srdeční onemocnění, zarudnutí kůže, záněty, zduřenyiny, přecitlivělost některých míst, cukrovka, poranění, popáleniny, ekzém nebo lupenka.
- V těhotenství nebo při zdravotních problémech konzultujte použití přístroje se svým lékařem.
- Děti nerozpoznají nebezpečí, která mohou vzniknout s používáním elektrických přístrojů. Postarejte se o tom, aby děti nepoužívaly přístroj bez dozoru.
- Před zapojením přístroje do sítě zkontrolujte, zda místní napětí souhlasí s napětím uvedeném na přístroji.
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti vody (např. vana, umývadlo atd.)
- Nepoužívejte přístroj pokud se koupete, sprchujete nebo spíte.
- Nedávejte jej do vody ani do jiných tekutin. Ukládejte přístroj na nějaké bezpečné místo.
- Neodkládejte přístroj na plochy citlivé na vodu!
- Používejte přístroj pouze s nasazenou maskou na obličej do sauny a páry.
- Přístroj držte dále od síťového kabelu a horkých ploch.

3. POUŽITÍ V SOULADU S URČENÍM

3.1 Důležitá upozornění během použití

Varování

- Pokud se během použití vyskytne závada, přístroj okamžitě odpojte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Obličej nemějte příliš blízko masky, aby Vás neopařila horká pára. Během použití zavřete oči a chraňte si horku náchylné zóny.
- Nepoužívejte přístroj déle než 20 minut.
- Při použití přístroje s ojeji či bylinkami přerušete používání vyskytne-li se podráždění pokožky nebo jiné neobvyklé jevy na pokožce.








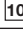

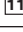

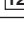
- Rovněž ukončete použití, vyskytnou-li se bolesti nebo nevolnosti a promluvte si se svým lékařem.
- Nepoužívejte přístroj pod dekou, ručníky atd. .
- Neměňte příslušenství během provozu, neboť při rozliti horkých tekutin hrozí nebezpečí popálení.
- Pozor: Ochrana proti přehřátí vypne přístroj asi po 2 minutě, jestliže již v zásobníku není žádná voda. Po ochlazení, které trvá asi 6 minut, můžete přístroj opět normálně zapnout.
- Pokud přístroj omylem spadne do vody, okamžitě zástrčku vytáhněte. Před dalším použitím nechte přístroj zkontrolovat kvalifikovaným elektrikářem.

3.2 Důležitá upozornění pro použití

Pozor

- Po použití přístroj vypněte a vytáhněte ze zásuvky.
- Nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky za kabel nebo vlhkýma rukama. Prosím vyprázdněte z postranního odpařovacího zařízení zbylé tekutiny. Dbejte zásadně na to, aby nepronikly žádné tekutiny vypínačem, kabelem nebo dnem přístroje do vnitřní části přístroje.
- Přístroj po použití vyčistěte, abyste zabránili usazování tuku a jiných nečistot. To zajišťuje optimální funkci přístroje a prodlužuje dobu jeho používání.
- Nechte přístroj před dalším uvedením do provozu zcela zchladit.
- Pokud byste k používání našich přístrojů měli další dotazy, obraťte se prosím na Vašeho prodejce nebo zákaznický servis společnosti Beurer.

4. POPIS PŘÍSTROJE

 1 Obličejová maska do sauny a páry na celý obličej	 7 Aroma nástavec
 2 Zásobník na vodu	 8 Obličejová maska do sauny a páry na nos a ústa
 3 Základní přístroj	 9 Ventil na páru (zadní strana)
 4 Maximální výška pro naplnění	 10 Parní deska
 5 Otáčivý vypínač	 11 Měrka
 6 Kontrolní světélko	 12 Stupně výkonu

5. UVEDENÍ DO PROVOZU

Kabel úplně odmotejte. Postavte přístroj na rovnou, pevnou a vodě odolnou plochu popř. stůl. Zásobník na vodu naplňte pomocí měrky. Maximální výška pro naplnění se nesmí překročit (obrázek _). Zásobník byste nikdy neměli plnit přímo pod tekoucí vodou, nýbrž pouze pomocí přiložené měrky. Při maximálním naplnění vystačí množství vody k 20 minutovému použití. Nepoužívejte oleje, bylinky nebo aromatické látky jako náhražku vody, nýbrž pouze jako doplněk k určitému množství vody. Vedle obličejové masky existuje také speciální nástavec na nos.

Požadovanou parní masku zafixujte otočením do výchozí pozice (obrázek _). Dbejte na to, aby forma pevně zapadla.

6. POUŽITÍ

Tento přístroj je určen pouze k používání na lidském obličejí.

Použití obličejové sauny nabízí ideální základ k péči o krásný obličej. Pokožka na Vašem obličejí je optimálně připravena k dalšímu ošetření jako např. hloubkové čištění, obličejové masky atd.

Studia krásy začínají velice často využívat k ošetření obličejové páry. Povzbuzující pára zvyšuje prokrvení kůže, otvírají se póry a nečistoty se lépe odstraňují.

Tak zajistíte perfektní výchozí základnu pro každý způsob péče o pleť. Otevřenými póry pronikají péstící produkty hluboko do kůže a optimalizují tak jejich účinek.

6.1 Použití sauny na obličej

Zasuňte zástrčku do zásuvky. Potom otáčejte spínačem ve směru chodu hodinových ručiček, dokud se nerozsvítí modrá kontrolka. Pootočte vypínačem do pozice „2“, abyste urychlili zahřívání. Po asi 3 minutách začíná pára stoupat. Pootočte vypínačem zpět do pozice „1“, abyste zredukovali výkon páry.

Nastavitelné vypouštění páry:

Sílu parní produkce můžete mimo jiné regulovat otočením parní desky.

Při uzavřeném vypouštění páry vystupuje pára z parního ventilu, který se nachází na zadní části přístroje popř. masky. (viz obrázek) Zavřením parní desky můžete zahřívací fázi vody zkrátit. Abyste zabránili popáleninám, nedotýkejte se přímo vypouštění páry a dbejte na to, aby pára mohla volně vystupovat z ventilu. Posadte se před přístroj. Nakloňte se dopředu tak, dokud nebude obličej nad maskou (obrázek).

Varování

Přístroj nadržte v ruce a během provozu ho nepřemísťujte, dokud se neochladí. Mohli byste se popálit horkou vodou.

Pokud působení páry cítíte jako příliš horké, zvětšete vzdálenost, aby nedošlo k popálení.

Varování

Vystupující pára je horká!

Během ošetření byste měli vypínač vždy otočit zpět do pozice „1“.

Nadržte obličej příliš blízko u masky, silná intenzita páry by mohla způsobit popálení nebo zčervenání pokožky.

Chcete-li ukončit použití nebo se z vody stala pára, otočte vypínačem zpět do pozice „0“.

Kontrolní světélko přístroje zhasne.

Po použití přístroje si umyjte obličej studenou vodou. Naneste si krém na obličej nebo masku.

Otevřené póry nechají látky proniknout hluboko do kůže.

Nepoužívejte saunu na obličej déle než 20 minut denně. Doporučuje se použití 2 -3krát týdně.

6.2 Použití léčivých bylin, olejů a jiných aromatických látek

Aroma nástavec Vám nabízí možnost použití léčivých bylin, olejů a jiných aromatických látek v rámci aromaterapie. Léčivé byliny, oleje a jiné aromatické látky, které se smísí s vodní párou dosahují nejlepších účinků. Nesmí se používat roztoky obsahující sůl. Mohou se použít pouze takové léčivé byliny, oleje a aromatické látky, které jsou pro použití parní masky určeny a doporučeny a jsou povoleny výrobcem.

Použití:

Otevřete víko aroma nástavce (viz obrázek). Nakapejte několik kapek oleje na bavlněný tampón. Vložte bavlněný tampón a uzavřete aroma nástavec.

Pozor: Do nádržky na vodu nepřidávejte žádné vonné látky, mohlo by dojít k poškození přístroje. V případě nedodržení těchto pokynů záruka zaniká.

6.3 Použití parní masky na nos/ústa.

Jelikož je lidská nosní sliznice velice citlivá, nepoužívejte nikdy přístroj s parní maskou na nos/ústa nastavený na „stupeň 2“. Nedržte nos během použití příliš blízko masky (viz obrázek). Používejte tak, jak je popsáno v bodě 6.1.

7. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Ytáhněte zástrčku. Než parní masku oddělíte z výchozí pozice otočením v protisměru hodinových ručiček, nechte přístroj asi 10 – 15 minut zchladit. Vyprázdněte zásobník na vodu, přičemž vrchní stranu držte směrem dolů.

Po každém použití vyčistěte parní misku od tuků a vápenitých usazenin běžným, pro aluminium vhodným odvápnovacím prostředkem.

K čištění povrchů přístrojů a parní masky používejte prosím měkký, lehce navlhčený hadřík a utřete povrch do sucha.

- Nepoužívejte k čištění plastových částí žádné ostré prostředky (např. alkohol, aceton, benzin nebo brusný prostředek)
- Nepoužívejte k čištění žádné ostré a špičaté předměty
- Neponořujte přístroj do vody

8. LIKVIDACE

V zájmu ochrany životního prostředí nelze přístroj po ukončení jeho životnosti likvidovat spolu s domácím odpadem.

Likvidace se musí provést prostřednictvím příslušných sběrných míst ve vaší zemi. Přístroj zlikvidujte podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE). Pokud máte otázky, obraťte se na příslušný komunální úřad, který má na starosti likvidaci.



9. TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení	230-240 V~; 50-60 Hz; 120 W
Rozměry	19,5 x 18,0 x 30 cm
Hmotnost	ca. 648 g

Technické změny vyhrazeny.

10. ZÁRUKA

Více informací o záruce a záručních podmínkách naleznete v příloženém záručním listu.



Pozorne si prečítajte tento návod na použitie. Starostlivo si prečítajte výstražné a bezpečnostné upozornenia. Tento návod na použitie si ponechajte na neskoršie použitie. Návod na použitie sprístupnite iným používateľom. Pri postúpení prístroja odovzdajte aj návod na použitie.

Obsah balenia

Skontrolujte rozsah dodávky, či jej kartónový obal nevykazuje vonkajšie poškodenia a či je obsah balenia kompletný. Pred použitím sa musíte uistiť, že prístroj a príslušenstvo nevykazujú žiadne viditeľné poškodenia a že je odstránený všetok obalový materiál. V prípade pochybností ho nepoužívajte a obráťte sa na svojho predajcu alebo na uvedenú adresu zákaznického servisu.

- 1 x Tvárová sauna
- 2 x Nadstavce
- 1 x Odmerka
- 1 x Návod na obsluhu
- 1 x Záručný list

Obsah








1. Vysvetlenie symbolov	11	6.2 Používanie liečivých bylín, olejov a ďalších aromatických látok	15
2. Výstražné a bezpečnostné upozornenia.....	12	6.3 Používanie napařovacej masky na nos/ ústa	15
3. Použitie podľa určenia	13	7. Čistenie a starostlivosť o prístroj	15
3.1 Dôležité upozornenia pred použitím	13	8. Likvidácia.....	16
3.2 Dôležité upozornenia počas používania	13	9. Technické údaje.....	16
4. Popis prístroja.....	13	10. Záruka	16
5. Uvedenie do prevádzky.....	14		
6. Použitie	14		
6.1 Použitie tvárovej sauny.....	14		






VÝSTRAHA

- Prístroj je určený iba na použitie v domácom/súkromnom prostredí, nie na komerčné použitie.
- Tento prístroj môžu používať deti vo veku od 8 rokov, ako aj osoby s obmedzenými fyzickými, sensorickými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami alebo vedomosťami, ak sú pod dohľadom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a ak rozumejú nebezpečenstvám, ktoré z toho vyplývajú.
- Deti sa nesmú hrať s prístrojom.
- Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- V prípade, že sa poškodí elektrický prívodný kábel tohto prístroja, musí sa zlikvidovať. Ak ho nie je možné odobrať, prístroj sa musí zlikvidovať.
- Vždy dbajte na bezpečné a rovné umiestnenie prístroja. Hrozí nebezpečenstvo obarenia vytekajúcimi kvapalinami.
- Pozor, unikajúca para je horúca.
- Prístroj nesmiete v žiadnom prípade otvárať alebo vykonávať opravy, pretože inak nie je zaručená bezchybná funkčnosť prístroja. Pri nedodržaní pokynov zaniká záruka.

1. VYSVETLENIE SYMBOLOV

Na prístroji, v návode na použitie, na obale a na typovom štítku prístroja sa používajú nasledovné symboly:

	Výstraha	Výstražné upozornenie poukazujúce na nebezpečenstvo zranenia alebo ohrozenie vášho zdravia
	POZOR	Bezpečnostné upozornenie na možné škody na prístroji/príslušenstve
	Upozornenie	Aplikácie vykonávajte iba pri stupni 1! Pri aplikáciách na stupni 2 môže horúca para a zahrievanie nástavca spôsobiť začervenania kože, ako aj popáleniny.
	Značka CE	Tento výrobok spĺňa požiadavky platných európskych a národných noriem.
		Prístroj zlikvidujte v súlade so smernicou ES o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)
	Výrobca	
	Prístroj triedy ochrany II	Prístroj je vybavený dvojitou ochrannou izoláciou a teda zodpovedá triede ochrany 2

	<p>Tvář počas použitia prístroja nedržte príliš blízko pri maske, pretože v opačnom prípade môže horúca para spôsobiť popáleniny.</p>
	<p>Prečítajte si pokyn</p>
	<p>Výrobky preukázateľne zodpovedajú požiadavkám technických predpisov EAEU.</p>
	<p>Obal ekologicky zlikvidujte</p>
	<p>Značka posúdenia zhody Spojeného kráľovstva</p>

2. VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Výstraha

- Prístroj je určený len na účel popísaný v návode na obsluhu. Výrobca neručí za škody, ktoré vzniknú v dôsledku nesprávneho alebo ľahkovážneho použitia. Tento prístroj nie je určený na komerčné použitie a použitie v medicínskej oblasti. Prístroj používajte iba na domáce použitie.
- Prístroj nepoužívajte, ak trpíte na ochorenie srdca, sčervenanie kože, zápal, opuchy, citlivé miesta, diabetes, rany, popáleniny, ekzémy alebo psoriázu.
- Počas tehotenstva alebo pri zdravotných problémoch sa pred použitím prístroja poraďte s vaším lekárom.
- Deti nevedia rozpoznať nebezpečenstvá vyplývajúce z elektrických prístrojov. Zabezpečte, aby deti nemohli používať prístroj bez dozoru.
- Pred zapojením prístroja do elektrickej siete skontrolujte, či sa miestne sieťové napätie zhoduje s napätím uvedeným na prístroji.
- Prístroj nepoužívajte v blízkosti vody (napr. vaňa, umývadlo, atď.).
- Prístroj nepoužívajte pri kúpaní, sprchovaní alebo počas spánku.
- Prístroj neponárajte do vody alebo iných kvapalín. Prístroj uchovávajte na bezpečnom mieste.
- Prístroj neumiestňujte na povrchy citlivé na vodu!
- Prístroj používajte len s nasadenou naparovacou maskou tvárovej sauny.
- Prístroj a sieťový kábel uchovávajte mimo horúcich povrchov.

3. POUŽITIE PODĽA URČENIA

3.1 Dôležité upozornenia pred použitím

Výstraha

- V prípade, že by sa počas používania vyskytla porucha, prístroj okamžite vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Tvár počas použitia prístroja nedržte blízko pri maske, pretože v opačnom prípade môže horúca para spôsobiť popáleniny. Počas použitia si zatvorte oči a chráňte oblasti citlivé na teplo.
- Prístroj nepoužívajte dlhšie ako 20 minút.
- Použitie s olejmi a bylinkami prerušte, ak sa na koži vyskytnú podráždenia alebo iné nezvyčajné prejavy.
- Rovnako používanie prerušte v prípade výskytu bolestí alebo nevoľnosti a poraďte sa s vaším lekárom.
- Prístroj nepoužívajte pod dekou, uterákmi atď.
- Diely príslušenstva nevymieňajte počas prevádzky, pretože pri vyliatí horúcich kvapalín vzniká nebezpečenstvo popálenia.
- Pozor: Ochrana proti prehriatiu automaticky prístroj vypne po cca 2 minútach, ak sa v nádrži na vodu nenachádza žiadna voda. Po dobe ochladenia v trvaní cca 6 minúty je možné prístroj opäť normálne zapnúť.
- V prípade, že prístroj omylom spadol do vody, okamžite vytiahnite sieťovú zástrčku. Pred ďalším použitím nechajte prístroj skontrolovať kvalifikovaným inštalátorom.

3.2 Dôležité upozornenia počas používania

Pozor

- Po použití prístroj vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Zástrčku nikdy neťahajte zo zásuvky za kábel alebo s mokrymi rukami.
- Zvyšné kvapaliny vyprázdnite z odparovacej nádoby z bočnej strany. Zásadne dohliadnite na to, aby sa nedostali cez spínač, sieťový kábel alebo spodok prístroja dovnútra prístroja žiadne kvapaliny.
- Prístroj sa musí po použití vyčistiť, aby sa predišlo nahromadeniu tuku a iných zvyškov. Následne je zabezpečená optimálna účinnosť a predlžuje sa životnosť prístroja.
- Pred opätovným uvedením do prevádzky prístroj nechajte kompletne vychladnúť. V prípade otázok týkajúcich sa použitia našich prístrojov sa obráťte na svojho predajcu alebo na zákaznícky servis.

4. POPIS PRÍSTROJA

1 Tvárová sauna – napařovacia maska na celú tvár	7 Nadstavec na pridanie arómy
2 Nádrž na vodu	8 Tvárová sauna – napařovacia maska na nos a ústa
3 Základný prístroj	9 Parný ventil (zadná strana)
4 Maximálna výška plnenia	10 Odparovacia platňa
5 Otočný prepínač	11 Odmerka
6 Svetelná kontrolka	12 Výkonovými stupňami

5. UVEDENIE DO PREVÁDZKY

Kompletne rozviňte kábel. Prístroj položte na rovný, pevný povrch, ktorý nie je citlivý na vodu, prípadne stôl.

Pomocou odmerky naplňte vodu do nádrže na vodu prístroja. Maximálna výška naplnenia sa nesmie prekročiť.

Nádrž by ste nikdy nemali plniť priamo pod tečúcou vodou, ale len pomocou priloženej odmerky. Množstvo vody postačuje pri maximálnej výške hladiny na jedno použitie s trvaním cca 20 minút. Nepoužívajte oleje, bylinky ani iné aromatické látky ako náhradu vody, ale len dodatočne k dostatočnému naplneniu vodou.

K maske na tvár je navyše k dispozícii špeciálny nadstavec na nos. Otáčaním zafixujte požadovanú naparovaciu masku k základnej jednotke. Dbajte na to, aby blokovacie výstupky na maske pevne zapadli.

6. POUŽITIE

Tento prístroj je určený výlučne na použitie na ľudskej tvári.

Použitie tvárovej sauny poskytuje ideálny základ starostlivosti o krásu tváre. Vaša pokožka tváre sa tak optimálne pripraví na ďalšie ošetrovanie, napr. hĺbkové čistenie, hydratáciu, tvárové masky atď. Kozmetické salóny veľmi často začínajú ošetrovanie tváre parným ošetrovaním.

Revitalizujúca para zvyšuje prekrvenie kože, spôsobuje otváranie pórov a umožňuje lepšie odstránenie nečistôt. Vytvoríte tak perfektný úvodný základ pre každý druh starostlivosti o pokožku tváre. Cez otvorené póry prenikajú kozmetické výrobky hlboko do kože a ich účinok sa tým optimalizuje.

6.1 Použitie tvárovej sauny

Zasuňte sieťovú zástrčku do zásuvky. Potom otočte spínač v smere pohybu hodinových ručičiek, kým zasvieti modrá svetelná kontrolka. Nastavte spínač najskôr do polohy „2“, aby ste urýchlili zahriatie. Po cca 3 minútach začne vystupovať para. Otočte spínač naspäť do polohy „1“, aby ste znížili parný výkon.

Nastaviteľný výstup pary:

Silu produkcie pary môžete okrem toho regulovať otáčaním odparovacej platne.

Pri zatvorenom výstupe pary vystupuje para z parného ventilu, ktorý sa nachádza na zadnej časti prístroja, resp. masky.

Uzavretím odparovacej platne možno skrátiť fázu zohrievania vody.

Aby sa zabránilo popáleninám, nikdy sa nedotýkajte priamo výstupu pary a dbajte na to, aby mohla para voľne unikať z ventilu.

Posadte sa pred prístroj. Skloňte sa tak ďaleko dopredu, aby sa vaša tvár nachádzala nad maskou.

Výstraha

Prístroj nedržte v ruke a počas prevádzky ho neprestavujte, kým nie je ochladený. Mohli by ste sa pritom popáliť horúcou vodou.

V prípade, že je para vnímaná ako príliš horúca, zväčšte vzdialenosť, aby ste predišli popáleninám.

Výstraha

Unikajúca para je horúca! Počas ošetrovania by ste mali spínač vždy otočiť späť do polohy „1“. Tvár nedržte príliš blízko pri maske, pretože následkom vysokej intenzity pary sa môžu vyskytnúť popáleniny alebo začervenania.

Keď chcete používanie ukončiť alebo keď sa voda odparila, otočte spínač späť do polohy „0“. Svetelná kontrolka prístroja zhasne. Po použití si tvár umyte studenou vodou. Následne naneste krém na tvár alebo pleťovú masku. Otvorené póry umožnia účinným látkam preniknúť do kože. Tvárovú saunu nepoužívajte dlhšie ako 20 minút denne. Odporúčajú sa 2 až 3 použitia týždenne.

6.2 Používanie liečivých bylín, olejov a ďalších aromatických látok

Nadstavec na pridanie arómy vám poskytuje možnosť použiť v rámci aromaterapie liečivé bylinky, oleje a iné aromatické látky. Liečivé bylinky, oleje a iné aromatické látky, ktoré sa zmiešajú s vodnou parou, tak najlepšie rozvinú svoj účinok. Nesmú sa však používať žiadne roztoky obsahujúce soľ.

Používať sa smú len také liečivé bylinky, oleje a aromatické látky, ktoré sú určené a vhodné pre použitie v naparovacej maske, a boli na tento cieľ výrobcom týchto látok schválené.

Použitie:

Otvorte kryt nadstavca na pridanie arómy. Na bavlnený vatový tampón dajte pár kvapiek oleja. Vložte bavlnený vatový tampón a potom zatvorte nadstavec na pridanie arómy.

Pozor: Nepľňte aromatické látky priamo do nádrže na vodu, môže to viesť k poruche prístroja. Pri nedodržaní pokynov záruka zaniká.

6.3 Používanie naparovacej masky na nos/ústa

Keďže nosná sliznica človeka je veľmi citlivá, nepoužívajte nikdy prístroj pri použití naparovacej masky na nos/ústa na „stupni 2“. Počas používania prístroja nedržte nos príliš blízko pri maske. Procedúra by nemala trvať viac ako 10 minút denne a mala by prebiehať nanajvýš 2 – 3 razy týždenne.

Použitie prebieha, ako je opísané v bode 6.1.

7. ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ O PRÍSTROJ

Vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Nechajte prístroj približne 10 – 15 minút vychladnúť, skôr ako naparovaciu masku oddelíte od základnej jednotky otáčaním proti smeru pohybu hodinových ručičiek. Vyprázdňte nádrž na vodu tým, že hornú stranu podržíte nadol.

Po každom použití vyčistite odparovaciu misku od tuku a zvyškov vodného kameňa pomocou bežného odvápnovacieho prostriedku, vhodného na hliník.

Na čistenie povrchu prístroja a naparovacej masky použite mäkkú, mierne navlhčenú utierku a povrch utrite.

- Na čistenie plastových častí nepoužívajte žiadne agresívne prostriedky (napr. alkohol, acetón, benzín alebo abrazívne prostriedky).
- Na čistenie nepoužívajte žiaden ostrý alebo špicatý predmet.
- Prístroj neponárajte do vody.

8. LIKVIDÁCIA

V záujme ochrany životného prostredia sa prístroj po ukončení životnosti nesmie likvidovať s domovým odpadom. Likvidácia sa môže vykonať prostredníctvom príslušných zberní vo vašej krajine. Prístroj zlikvidujte v súlade so smernicou ES o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).



V prípade otázok sa obráťte na miestny úrad zodpovedný za likvidáciu.

9. TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájanie	230-240 V~; 50-60 Hz; 120 W
Rozmery	19,5 x 18,0 x 30 cm
Hmotnosť	ca. 648 g

Technické zmeny vyhradené.

10. ZÁRUKA

Bližšie informácie o záruke a záručných podmienkach nájdete v priloženom záručnom liste.

Chyby a zmeny vyhradené

605.03_FS60_2021-12-10_04_IM2_BEU_CS_SK

