





CS Masážní přístroj s infračerveným světlem
Návod k použití 3

SK Infračervený masážny prístroj
Návod na použitie 7

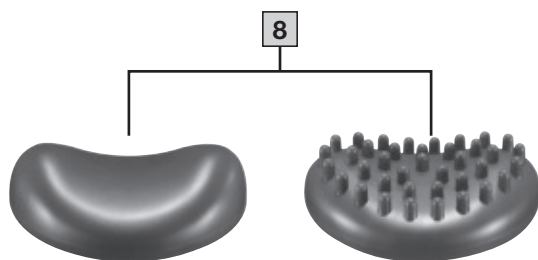

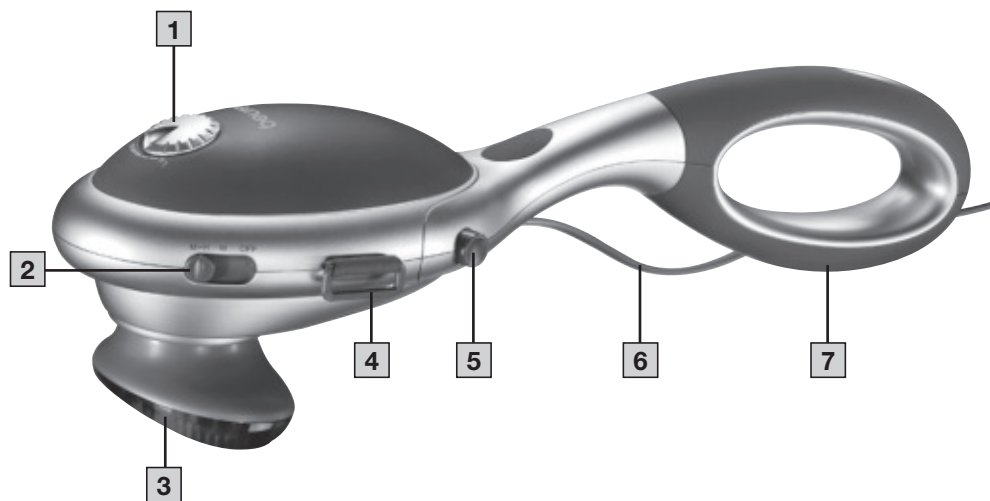

Přečtěte si pečlivě tento návod k použití, uschovejte ho pro pozdější použití, poskytněte ho i ostatním uživatelům a řiďte se pokyny, které jsou v něm uvedené.

VAROVÁNÍ

- Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let i osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny ohledně bezpečného používání přístroje a chápou z toho vyplývající rizika.
- Děti si s přístrojem nesmí hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dohledu.
- Jestliže dojde k poškození napájecího kabelu u tohoto přístroje, musíte ho odstranit. Pokud ho nelze vyjmout, musíte zlikvidovat přístroj.
- Do otvorů přístroje a mezi pohyblivé části nezasunujte žádné předměty. Dávejte pozor na to, aby se pohyblivé části mohly vždy volně pohybovat.
- Nevkládejte nebo netlačte žádnou část těla, zejména prsty, mezi pohyblivé masážní prvky nebo jejich uchycení v přístroji.
- Povrch přístroje je horký. Osoby, které jsou citlivé na teplo, musí být při používání opatrné.
- V žádném případě nesmíte přístroj otvírat ani opravovat, jinak již nelze zaručit jeho správné fungování. V případě nedodržení těchto pokynů záruka zaniká.

Obsah

1. Obsah balení	4	7. Použití.....	5
2. Vysvětlení symbolů.....	4	8. Čištění a údržba	5
3. Použití v souladu s určením.....	4	9. Likvidace	5
4. Varovné a bezpečnostní pokyny.....	4	10. Technické údaje.....	5
5. Popis přístroje.....	5	11. Záruka/servis.....	5
6. Uvedení do provozu	5		

1. OBSAH BALENÍ

Zkontrolujte, zda je obsah balení uložen v neporušeném obalu a zda je kompletní. Před použitím se ujistěte, zda přístroj a jeho příslušenství nevykazují žádná viditelná poškození a zda jsou odstraněny veškeré obaly. V případě pochybností přístroj nepoužívejte a obraťte se na prodejce nebo zákaznický servis. Adresy servisních středisek jsou uvedeny v návodu.

- 1 x Masážní přístroj s infračerveným světlem
- 2 x Vyměnitelné masážní nástavce
- 1 x Tento návod k použití

2. VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ

Na přístroji, v návodu k použití, na obalu a typovém štítku přístroje jsou použity následující symboly:

	Varovné Varovné upozornění na nebezpečí poranění nebo riziko ohrožení zdraví
	Pozor Bezpečnostní upozornění na možné poškození zařízení/příslušenství
	Informace o produktu Upozornění na důležité informace
	Přístroj třídy ochrany II
	Čtete pokyny
	Výrobce
	Štítek pro identifikaci obalového materiálu. A = zkratka materiálu, B = číslo materiálu: 1-7 = plasty, 20-22 = papír a lepenka
	Produkt a součásti obalu roztříďte a zlikvidujte je v souladu s místními předpisy.
	Symbol dovozce
	(Elektrický) přístroj nesmí být likvidován spolu s domovním odpadem.
	Značka CE Tento výrobek splňuje požadavky platných evropských a národních směrnic.
	Výrobky prokazatelně odpovídají technickým předpisům EEU.
	Pouze pro použití v interiéru
	Označení posouzení shody pro Spojené království

3. POUŽITÍ V SOULADU S URČENÍM

- Přístroj lze používat pouze k účelu uvedenému v tomto návodu. Výrobce neručí za škody vzniklé nesprávným nebo lehkomyšlným použitím.
- Přístroj se smí připojit pouze k síťovému napětí uvedenému na výrobním štítku.

4. VAROVNÉ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Jako každý elektrický přístroj vyžaduje i tento masážní přístroj opatrné a rozvážné používání, aby se zabránilo úrazům elektrickým proudem:
 - Po každém použití ihned vytáhněte síťový kabel ze zásuvky.
 - Zabraňte jakémukoli kontaktu s vodou (při čištění používejte pouze lehce navlhčenou utěrkou). Voda se nikdy nesmí dostat dovnitř přístroje.
 - Nikdy nenamáčejte přístroj do vody. V žádném případě nepoužívejte přístroj ve vaně, pod sprchou, v bazénu nebo nad umyvadlem naplněným vodou. Pokud by se dovnitř přístroje přesto dostala voda, ihned jej odpojte od elektrické sítě a obraťte se na prodejce s elektrickými přístroji nebo na zákaznický servis.
 - Před každým použitím zkontrolujte, zda přístroj a zejména síťový kabel nejsou poškozeny.
 - Poškozený síťový kabel v žádném případě nezapojujte do elektrické sítě. obraťte se na prodejce elektrospotřebičů nebo zákaznický servis.
 - Opravy mohou provádět jen zákaznické servisy nebo autorizovaní prodejci.
 - Přístroj nikdy nedržte nebo nenoste za síťový kabel.
 - Pokud se během používání vyskytne závada, přístroj okamžitě vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Nepoužívejte žádné jiné masážní nástavce kromě těch, které jsou součástí balení.
- Přístroj je určen pouze pro vlastní potřebu, ne pro lékařské nebo komerční účely.
- Nikdy nezakrývejte zapnutý přístroj (dekou, polštářem, ...)
- Nikdy nevládejte žádné předměty do otvorů přístroje. Dávejte pozor na to, aby se pohyblivé části mohly vždy volně pohybovat a neuvízly v nich žádné předměty nebo dokonce prsty. Dávejte pozor na to, aby se do přístroje nezamotaly vlasy. Případně používejte sítku na vlasy.
- Vypněte přístroj a odpojte ho od sítě, jestliže chcete sejmout nebo nasadit rukojeť či masážní nástavce.
- Nikdy nenechávejte zapnutý přístroj bez dozoru, zejména pokud jsou v blízkosti dětí.
- Děti, bezmocné nebo postižené osoby mohou přístroj používat pouze pod dohledem dospělých nebo se s přístrojem musí nejdříve dobře seznámit.
- Masážní přístroj nepoužívejte v posteli. Při používání nesmíte v žádném případě usnout.

VAROVÁNÍ

- Nepoužívejte přístroj déle než 20 minut bez přestávky, mohlo by dojít k jeho přehřátí. Před dalším použitím nechejte přístroj vychladnout.
- Povrch přístroje se při používání zahřívá. Zejména osoby, které jsou méně citlivé na teplo, by si měly dávat velký pozor.
- Nepoužívejte u drobných ani u větších zvířat.
- Osoby s kardiostimulátorem by měly používat masážní přístroje konzultovat nejdříve se svými lékaři, v žádném případě si nesmí masírovat srdeční oblast.
- Přístroj nikdy nepoužívejte na oteklé, spálené nebo poraněné kůže a tělesných partiích.
- Kromě toho nikdy nemasírujete: kosti (např. klouby, páteř), hlavu nebo jiná citlivá místa na těle.
- Neprovádějte masáž, pokud trpíte horečnatým nastydnutím, křečovými žilami, trombózou, zánětem žil, žloutenkou, diabetem, nervovým onemocněním (např. ischias), akutními záněty nebo v době těhotenství. V těchto případech se poraďte s lékařem.

5. POPIS PŘÍSTROJE

Patřící nákresy jsou zobrazeny na straně 2.

- 1 Regulátor (plynule nastavitelná rychlost masáže)
- 2 Posuvný spínač:
 - OFF – vypnuto
 - M – masáž
 - M+H – masáž a infračervené zahřívání
- 3 Masážní plocha s infračerveným zahříváním
- 4 Uchycení pro poutko
- 5 Tlačítka pro zajištění rukojeti
- 6 Síťový kabel
- 7 Neklouzává, snímatelná rukojeť
- 8 Vyměnitelné masážní nástavce:
 - jemný nástavec
 - nástavec s výstupky
- 9 Masážní hlavice
- 10 Poutko
- 11 Zásuvný prvek

6. UVEDENÍ DO PROVOZU

Účel použití: Přístroj je určen výhradně k masáži lidského těla. Můžete si vybrat, zda použijete masážní přístroj s nasazenou rukojetí nebo bez rukojeti s upevňovacím poutkem. Při snímání rukojeti musíte pevně stisknout obě tlačítka pro zajištění rukojeti a stáhnout rukojeť z masážní hlavice. Pak zasuněte v zadní části masážní hlavice zásuvný prvek, aby se zařízení pro připojení rukojeti zakrylo.

7. POUŽITÍ

Zasuňte ruku pod poutko. Nastavte délku poutka pomocí suchého zipu tak, abyste mohli dlaní obejmout masážní hlavici a bezpečně s ní pohybovat.

Pokud chcete opět namontovat rukojeť, vysuňte nejdříve zásuvný prvek a nasadte rukojeť tak, aby viditelně a slyšitelně zaklapla do správné polohy. Síťový kabel vystupuje z přístroje pod tlačítky pro zajištění rukojeti.

Masáž můžete provádět s masážním nástavcem nebo bez nástavce. Podle potřeby vyberte jeden z masážních nástavců. Při masáži se zahříváním infračerveným světlem „M+H“ zabraňují nasazené masážní nástavce pronikání tepla infračerveného záření. Používejte proto přístroj pouze v poloze „M“, jestliže máte nasazený masážní nástavec.

Před zapojením kabelu do elektrické sítě se ujistěte, že je přístroj vypnutý. Nastavte posuvný spínač na přístroji do polohy „M“ – „jen masáž“ nebo „M+H“ – „masáž s infračerveným zahříváním“.

Nastavte požadovanou rychlost masáže pomocí regulátoru. Přiložte přístroj k místu, které chcete masírovat. Můžete stát, sedět nebo ležet a masírovat sebe nebo jinou osobu. Silnějším nebo méně silným přitlačením masážního přístroje můžete měnit intenzitu masáže. Nemasírujte příslušnou část těla déle než 3 minuty, přejděte pak k jinému místu na těle. Nejdéle po 20 minutách používání přístroj vypněte a nechejte ho vychladnout, zástrčku vytáhněte ze zásuvky. Přístroj uchovávejte v suchu.

8. ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA

Čištění



VAROVÁNÍ

- Před každým čištěním přístroj vždy vypněte.
- Přístroj čistěte jen lehce navlhčenou utěrkou.
- Přístroj čistěte pouze předepsaným způsobem. V žádném případě se do přístroje nebo jeho příslušenství nesmí dostat žádná tekutina.
- Přístroj opět použijte, jestliže je úplně suchý.
- Přístroj neumývejte v myčce na nádobí.
- Nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky nebo tvrdé kartáče! Před čištěním vytáhněte síťový kabel.

Utřete přístroj vlhkým hadříkem. Masážní nástavce se mohou čistit teplou mýdlovou vodou. Používejte pouze jemné domácí čističe.

Infračervený masážní přístroj používejte znovu až tehdy, je-li úplně suchý.

Údržba

Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, doporučujeme přístroj uložit v originálním obalu v suchém prostředí, ničím ho nezatěžujte.

9. LIKVIDACE

V zájmu ochrany životního prostředí nelze přístroj po skončení jeho životnosti likvidovat spolu s domácím odpadem. Likvidace se musí provést prostřednictvím příslušných sběrných míst ve vaší zemi. Přístroj zlikvidujte podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Pokud máte otázky, obraťte se na příslušný komunální úřad, který má na starosti likvidaci.



10. TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení	220–240 V~, 50/60 Hz, 22 W
Rozměry:	40,0 x 11,5 x 11,0 cm
Hmotnost:	ca. 992 g

11. ZÁRUKA/SERVIS

Další informace o záruce a záručních podmínkách naleznete v přiloženém záručním listu.



Starostlivo si prečítajte tento návod na použitie, uschovajte ho na neskoršie použitie, sprístupnite ho aj iným používateľom a dodržiavajte pokyny v ňom uvedené.

VÝSTRAHA

- Tento prístroj môžu používať deti vo veku od 8 rokov ako aj osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, s nedostatkom skúseností alebo s nedostatočnými vedomosťami, ak sú pod dohľadom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a ak rozumejú nebezpečenstvám, ktoré z toho vyplývajú.
- Deti sa nesmú hrať s prístrojom.
- Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- V prípade, že sa poškodí sieťové prírodné vedenie tohto prístroja, musí sa zlikvidovať. Ak ho nie je možné odobrať, prístroj sa musí zlikvidovať.
- Do otvorov prístroja nezasúvajte žiadne predmety a nič nevkladajte do pohybujúcich sa častí. Dbajte na to, aby sa pohyblivé časti mohli vždy voľne pohybovať.
- Medzi pohyblivé masážne prvky alebo ich držiaky v prístroji nedávajte a nevkladajte žiadnu časť tela, predovšetkým prsty.
- Povrch prístroja je horúci. Osoby, ktoré sú citlivé na teplo, musia byť pri používaní prístroja opatrné.
- Prístroj nesmiete v žiadnom prípade otvárať alebo vykonávať opravy, pretože inak nie je zaručená bezchybná funkčnosť prístroja. Pri nedodržaní pokynov zaniká záruka.

Obsah

1. Obsah balenia	7	7. Použitie	8
2. Vysvetlenie symbolov	7	8. Čistenie a starostlivosť	8
3. Účel použitia	7	9. Likvidácia	8
4. Výstražné a bezpečnostné upozomenia	7	10. Technické údaje	8
5. Popis prístroja	8	11. Záruka/servis	8
6. Uvedenie do prevádzky	8		

1. OBSAH BALENIA

Skontrolujte rozsah dodávky, či jej kartónový obal nevykazuje vonkajšie poškodenia a či je obsah balenia kompletný. Pred použitím sa musíte uistiť, že prístroj a príslušenstvo nevykazujú žiadne viditeľné poškodenia a že je odstránený všetok obalový materiál. V prípade pochybností ho nepoužívajte a obráťte sa na svojho predajcu alebo na uvedenú adresu zákazníckeho servisu.

- 1 x Infračervený masážny prístroj
- 2 x Vymeniteľné masážne nadstavce
- 1 x Tento návod na použitie

2. VYSVETLENIE SYMBOLOV

Na prístroji, v návode na použitie, na obale a na typovom štítku prístroja sa používajú nasledovné symboly:

	Výstraha Výstražné upozornenie poukazujúce na nebezpečenstvo zranenia alebo ohrozenie vášho zdravia
	Pozor Bezpečnostné upozornenie na možné škody na prístroji/príslušenstve
	Informácia o výrobku Odkaz na dôležité informácie
	Trieda ochrany II
	Prečítajte si pokyn
	Výrobca
	Štítok pre označenie obalového materiálu. A = skratka materiálu, B = číslo materiálu: 1 - 7 = plast, 20 - 22 = papier a lepenka
	Oddelte výrobok a obalové komponenty a zlikvidujte ich v súlade s komunálnymi predpismi.
	Symbol importéra
	Batérie sa nesmú likvidovať s komunálnym odpadom.
	Značka CE Tento výrobok spĺňa požiadavky platných európskych a národných noriem.
	Výrobky preukázateľne zodpovedajú požiadavkám technických predpisov EAEU.
	Len na použitie v interiéri
	Značka posúdenia zhody Spojeného kráľovstva

3. ÚČEL POUŽITIA

- Prístroj je určený len na účel popísaný v tomto návode na použitie. Výrobca neručí za škody, ktoré vzniknú v dôsledku nesprávneho alebo ľahkovážneho použitia.
- Prístroj pripojte iba k sieťovému napätiu, ktoré je uvedené na typovom štítku.

4. VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

- S týmto masážnym prístrojom je, rovnako ako s každým elektrickým prístrojom, potrebné zaobchádzať opatrne a obozretné, aby ste predišli nebezpečenstvu zásahu elektrickým prúdom: Ihneď po použití vytiahnite sieťový kábel znovu zo zásuvky.
 - Zabráňte akémukoľvek kontaktu s vodou (okrem čistenia mierne navlhčenou utierkou!). Do vnútra prístroja nesmie nikdy preniknúť voda.
 - Prístroj nikdy neponárajte do vody. Prístroj v žiadnom prípade nepoužívajte vo vani, sprche, bazéne alebo nad umývadlom s vodou. Ak aj napriek tomu do telesa prístroja prenikla voda, prístroj okamžite odpojte od siete a obráťte sa na svojho predajcu elektroniky alebo zákaznícky servis.
 - Prístroj a najmä sieťový kábel je potrebné pred každým použitím skontrolovať vzhľadom na možné poškodenia.
 - Pri poškodení sieťového kábla ho v žiadnom prípade nepripájajte na elektrické napájanie. Obráťte sa na svojho špecializovaného predajcu elektra alebo zákaznícky servis.
 - Opravy môže vykonávať len zákaznícky servis alebo autorizovaní predajcovia.
 - Nikdy nedržte ani nenoste prístroj za sieťový kábel.
 - Ak počas používania dôjde k poruche, okamžite prístroj vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Nepoužívajte iné než dodané masážne nadstavce.
- Prístroj je určený len na osobné použitie, nie na lekárske alebo komerčné účely.
- Nikdy nezakrývajte zapnutý prístroj (dekou, vankúšom, ...)
- Nikdy nezavádzajte predmety cez otvory do prístroja. Dbajte na to, aby sa pohyblivé časti mohli vždy voľne pohybovať a neboli zakliesnené žiadne predmety alebo dokonca prsty. Dbajte na to, aby sa na prístroji nezachytili vlasy. Prípadne noste sieťku na vlasy.
- Keď odoberáte alebo nasadzujete rukoväť alebo masážne nadstavce, vypnite prístroj a odpojte ho od siete.
- Prístroj nikdy nepoužívajte bez dozoru, predovšetkým ak sú v blízkosti deti.
- Deti, nevládne alebo zdravotne postihnuté osoby môžu prístroj používať iba pod dohľadom dospelých alebo sa musia najskôr oboznámiť s prístrojom.
- Masážny prístroj nepoužívajte v posteli. Počas používania nesmiete v žiadnom prípade zaspať.

VÝSTRAHA

- Prístroj sa nesmie používať neprerušovane dlhšie ako 20 minút, aby sa predišlo jeho prehriatiu. Pred opätovným použitím nechajte prístroj vychladnúť.
- Povrch prístroja sa počas používania zahrieva. Osoby citlivé na teplo prosíme o zvýšenú opatnosť.
- Nepoužívajte pri drobných zvieratách/zvieratách.
- Osobám s kardiostimulátorom sa odporúča poradiť sa pred použitím masážneho prístroja so svojim lekárom a nikdy nemasírovať oblasť srdca.
- Nikdy nepoužívajte prístroj na opuchnutú, spálenú alebo poranenú kožu a časti tela.
- Okrem toho sa nesmie masírovať: kosti (napr. kĺby, chrbtica), hlava alebo iné citlivé časti tela.
- V prípade horúčkovitých prechladnutí, pri kŕčových žilách, trombózach, zápaloch žíl, žltáčke, diabete, ochoreniach nervov (napr. ischias) alebo akútnych zápaloch nevykonávajte masáž. V takom prípade sa poraďte s vaším lekárom.

5. POPIS PRÍSTROJA

Príslušné nákresy sú zobrazené na strane 2.

- 1 Regulátor (plynulo nastaviteľná rýchlosť masáže)
- 2 Posuvný spínač:
 - OFF – vypnutie
 - M – masáž
 - M+H – masáž a infračervený ohrev
- 3 Masážna plocha s infračerveným ohrievaním
- 4 Uchytenie pre pridržiavaciu slučku
- 5 Tlačidlá na aretáciu rukoväte
- 6 Sieťový kábel
- 7 Nešmyklavá, odnímateľná rukoväť
- 8 Vymeniteľné masážne nadstavce:
 - jemný nadstavec
 - nopový nadstavec
- 9 Masážna hlavica
- 10 Pridržiavacia slučka
- 11 Zásuvný prvok

6. UVEDENIE DO PREVÁDZKY

Účel použitia: Prístroj slúži výlučne na masáž ľudského tela. Rozhodnite sa, či chcete masáž vykonávať s nasadenou rukoväťou alebo či chcete prístroj používať bez rukoväte a s pridržiavacou slučkou. Na odobratie rukoväte sa musia podržať pevne stlačené obidve tlačidlá na aretáciu rukoväte a rukoväť stiahnite z masážnej hlavice. Zásuvný prvok zasuníte do zadnej časti masážnej hlavice, aby ste zakryli zariadenie na upevnenie rukoväte.

7. POUŽITIE

Ruku zasuníte pod pridržiavaciu slučku. Nastavte dĺžku pridržiavacej slučky pomocou suchého zipsu, aby ste mohli dlaňou uchopiť masážnu hlavicu a bezpečne ju viesť.

Keď chcete znovu upevniť rukoväť, vytiahnite najprv zásuvný prvok a rukoväť opäť nasadíte, kým citeľne nezapadne. Sieťový kábel vychádza pod aretáciou rukoväte.

Masáž môžete vykonávať s masážnym nadstavcom alebo bez neho. Vyberte si na to ľubovoľne jeden masážny nadstavec. Pri tepelnom ošetrení infračerveným teplom „M+H“ zabrahujú nasadené masážne nadstavce privádzaniu tepla infračerveného zdroja. Prístroj preto používajte na „M“, len keď je nasťrený masážny nadstavec.

Pred pripojením sieťového kábla sa uistite, že je prístroj vypnutý. Prístroj zapnete posuvným spínačom na „M“ – „len masáž“ alebo „M + H“ – „masáž s infračerveným ohrevom“.

Pomocou regulátora nastavte požadovanú masážnu rýchlosť. Prístroj priložte na miesto na tele, ktoré chcete masírovať. Môžete stáť, sedieť alebo ležať a môžete masírovať seba alebo inú osobu. Silným alebo menej silným pritláčaním masážneho prístroja je možné meniť intenzitu masáže. Určité miesto na tele nemasírujte dlhšie ako 3 minúty a následne prejdite na ďalšiu oblasť tela. Po používaní v trvaní maximálne 20 minút prístroj

opäť vypnite, vytiahnite zástrčku a nechajte ho vychladnúť. Prístroj uchovávajte v suchu.

8. ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ

Čistenie



VÝSTRAHA

- Vypnite prístroj pred každým čistením.
- Prístroj čistite výlučne mierne navlhčenou utierkou.
- Prístroj čistite iba uvedeným spôsobom. Do prístroja alebo príslušenstva sa v žiadnom prípade nesmie dostať žiadna kvapalina.
- Prístroj opäť používajte až po úplnom vyschnutí.
- Prístroj neumývajte v umývačke riadu.
- Nepoužívajte na čistenie agresívne čistiace prostriedky alebo tvrdé kefy! Pred čistením vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Prístroj utrite mokrú handričkou. Masážne nadstavce je možné čistiť teplou mydlovou vodou. Používajte len jemné čistiace prostriedky do domácnosti.

Infračervený masážny prístroj opäť používajte až po úplnom vyschnutí.

Starostlivosť

Ak prístroj nebudete dlhší čas používať, odporúčame ho uschovať v originálnom balení v suchom prostredí a bez zataženia.

9. LIKVIDÁCIA

V záujme ochrany životného prostredia sa prístroj po ukončení životnosti nesmie likvidovať s komunálnym odpadom. Likvidácia sa môže vykonať prostredníctvom príslušných zberných miest vo vašej krajine. Prístroj zlikvidujte v súlade so smernicou ES o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). V prípade otázok sa obráťte na miestny úrad zodpovedný za likvidáciu.



10. TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájanie	220 – 240 V~, 50/60 Hz, 22 W
Rozmery:	40,0 x 11,5 x 11,0 cm
Hmotnosť:	ca. 992 g

11. ZÁRUKA/SERVIS

Blížšie informácie o záruke a záručných podmienkach nájdete v priloženom záručnom liste.

Omyl a zmeny vyhradené

649.05_MGT0_2025-09-17_06_IN2_BEU_CS-SK

